


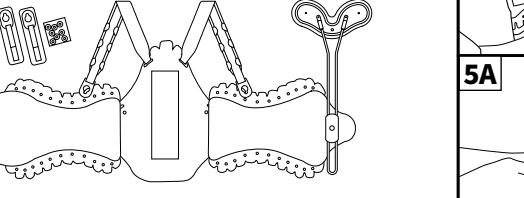


ASPEN®TLSO

THORACIC LUMBAR SACRAL ORTHOSIS
LUMBAL-SAKRAL-THORAKALE ORTHOSE
ORTESIS TORÁCICA LUMBOSACRA
ORTESI TORACICA SACRO-LOMBARE
ORTHÈSE THORACIQUE LOMBO-SACRÉE
LUMBALE SACRALE THORACALE ORTHÈSE
BEDERNÍ KŘÍŽOVÁ HRUDNÍ ORTÉZA
LÆNDEHVRVÆLSØJLØSTHORAXTOSÉ
ΟΣΦΥΓΙΚΗ ΘΟΡΑΚΙΚΗ ΟΡΘΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ
LUMBAL BRYSTORTOSE

ORTEZA PIERSIOWO-ŁEĐZWIO-KRZYŻOWA
LANNERGÅNG SAKRALINEN RINTAKEHÄORTOOSI

LUMBAL SAKRAL THORAKAL ORTOS**ОРТЕЗ ДЛЯ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛОВ****ПОЗВОНОЧНИКА****ÓRTESE TORÁCICA SACRO LOMBAR****腰脢部矯正器**


TLSO UPGRADE KIT

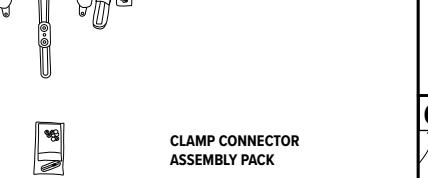

MD MEDICAL DEVICE

SINGLE PATIENT-MULTIPLE USE

CAUTION
















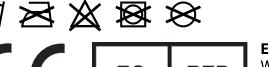
EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200

©2023 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.

TL0009J revised 03/2023

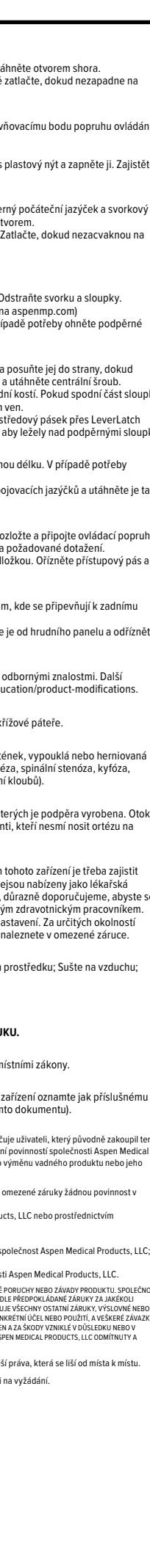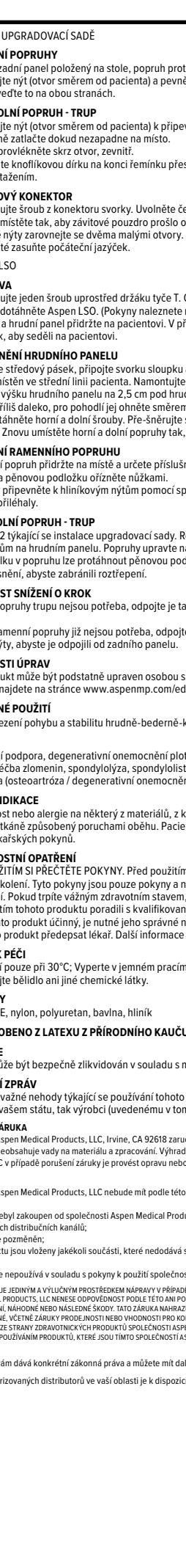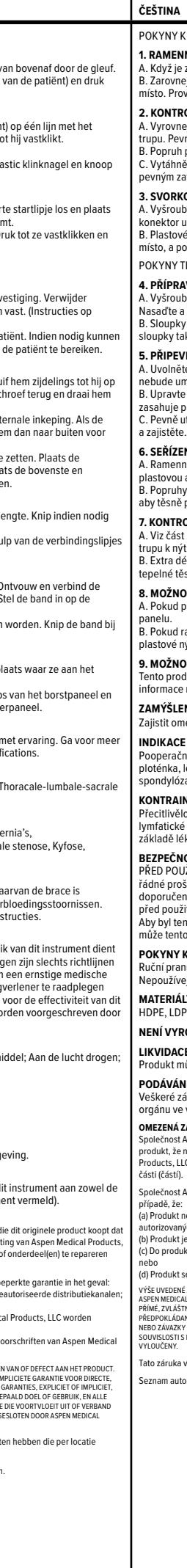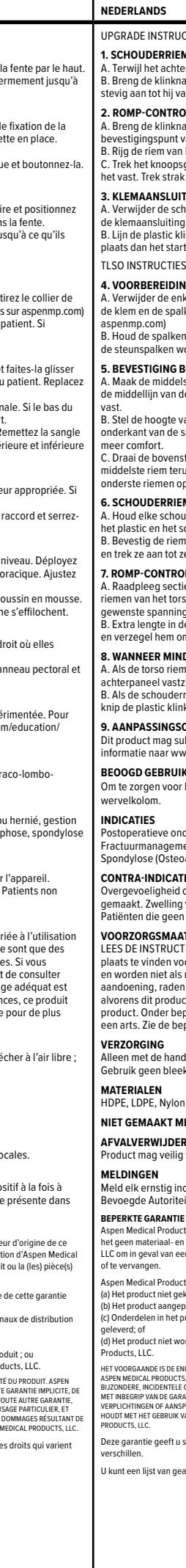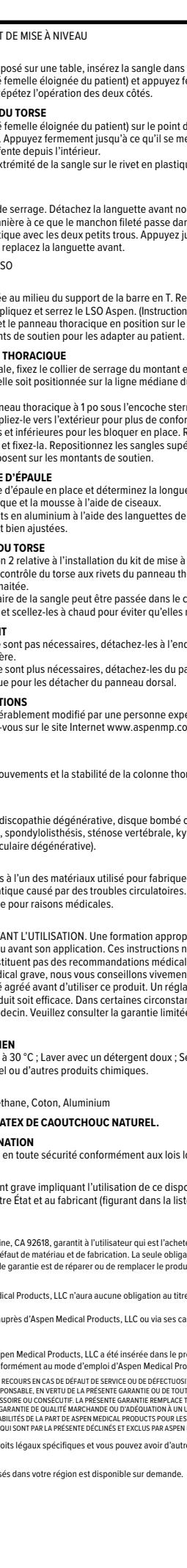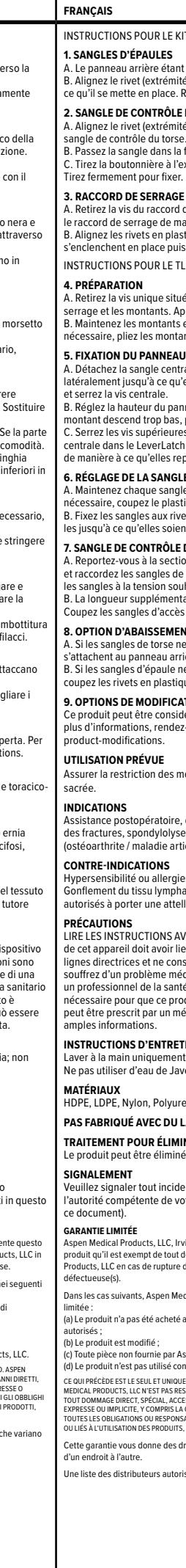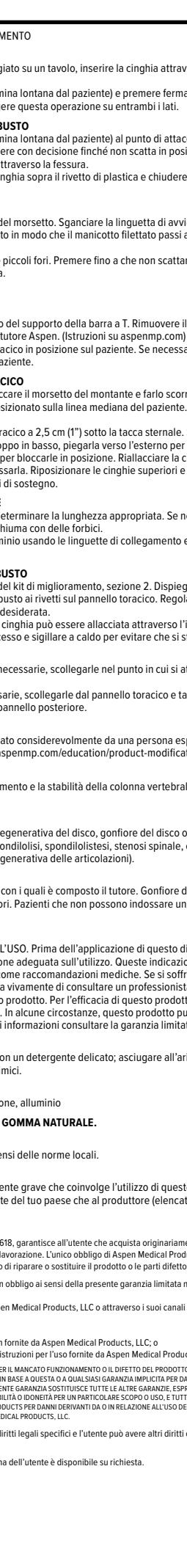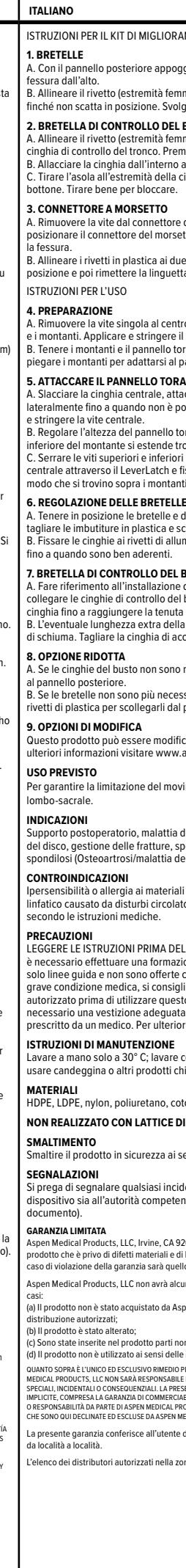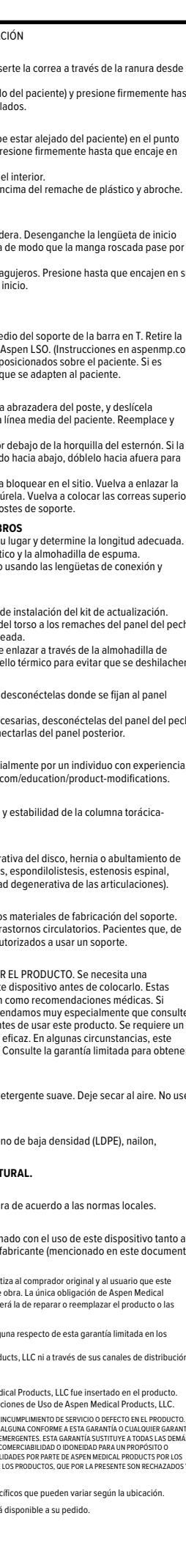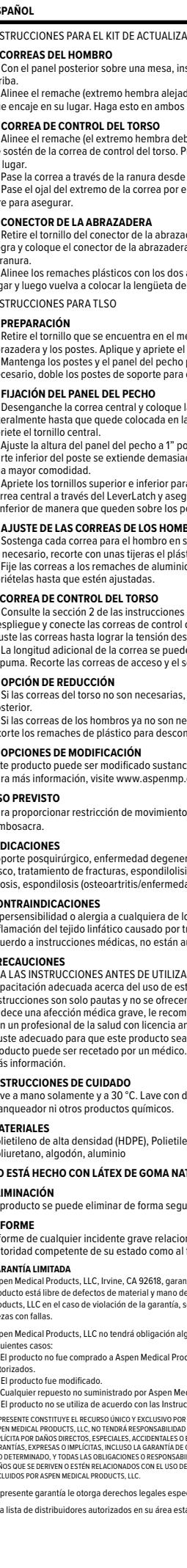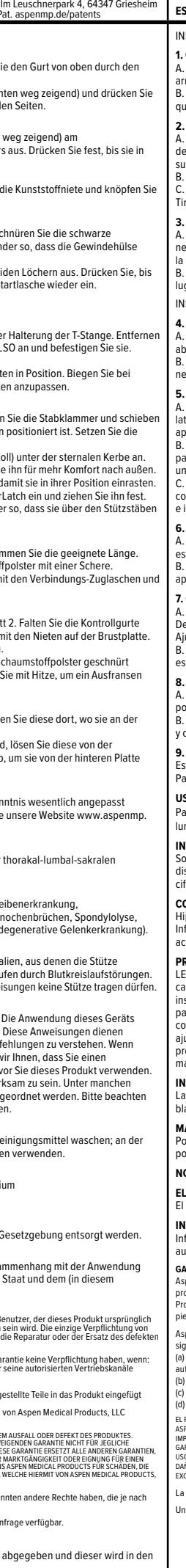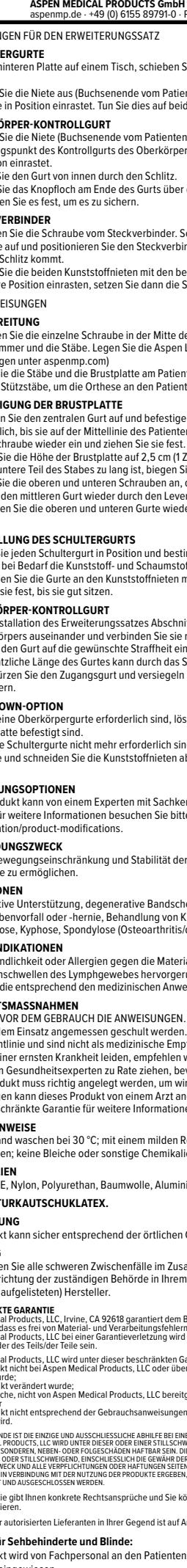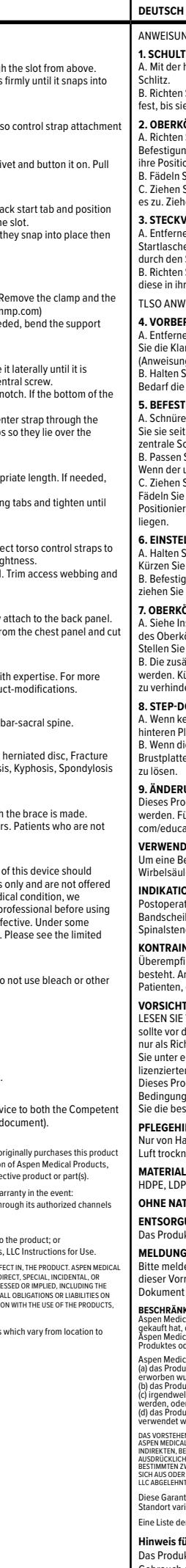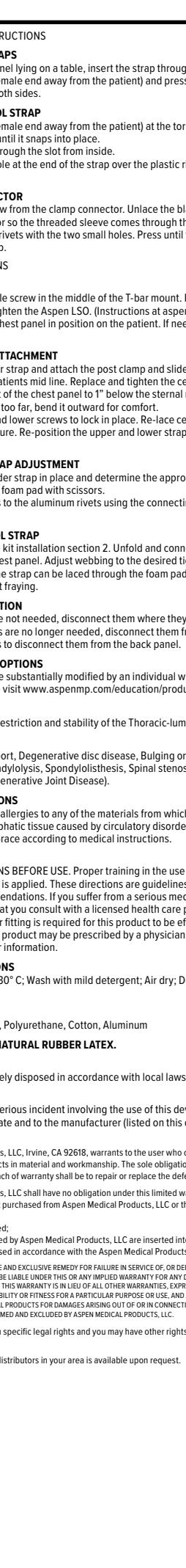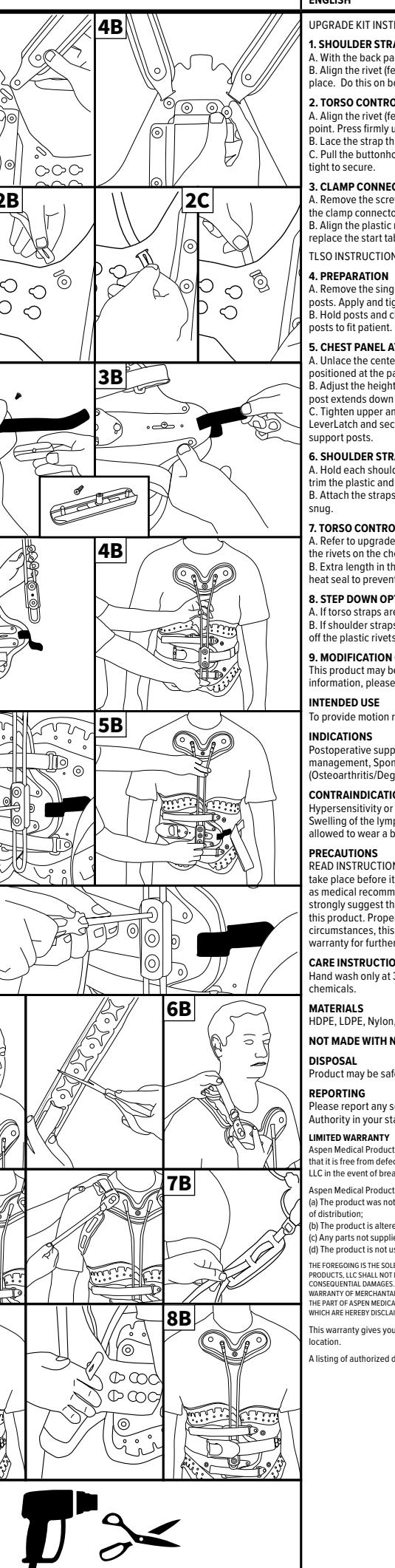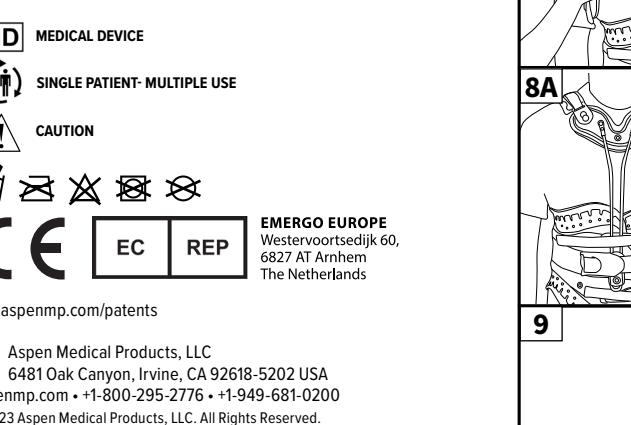

DANSK	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	NORSK	POLSKI	SUOMI	SVENSKA	РУССКИЙ	PORTUGUÉS	中文	
INSTRUKTION FOR OPGRADING AF SÆT				INSTRUKCJA DO ZESTAWU MODERNIZACYJNEGO		ИНСТРУКЦИИ К КОМПЛЕКТУ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ		升级套件使用说明	
1. SKUDLER STROPPE A. Når bagenæret ligger på et bord, skal du sætte remmen igennem åbningen fra oven. B. Juster nitten (hunenden væk fra patienten), og tryk den fast, indtil den klikker på plads. Gør dette nu begge sider.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΛΟΥΡΙΑ ΟΜΟΥ Α. Με το πιό φύλα να ακουμπά επάνω σε ένα τραπέζι, περάστε το λουρί μέσα από την σχοινή από τώρα. Β. Τυπάστε την (hunende væk fra patienten), og τρυκ γρήγορα στην πλάτη για να σταθεί στην θέση. Κάντε το από τα δύο πλευρές.		INSTRUKSJONER FOR OPPGRADERINGSSETT 1. SKUDLERSTROPP A. Med bakpanelen liggende på et bord, sett inn strøppen gjennom sporet ovenfra. B. Juster festet (hunende borte fra pasienten) og trykk godt til det smekker på plassen. Gør dette på begge sider.	PÄIVITYSPAKKAUKSEN OHJEET 1. PASY BARKOWE A. Gdy tylny panel leży na stole, należy przelożyc pasek przez otwór do góry. B. Koliada niitti (naaraspää poispäin potilaasta) ja paina lujusti, kunnies se napsahtaa paikalleen. Tee tämä molemmien puolin.	INSTRUKTION FÖR UPPGRADERINGSSATS 1. AXELREMMAR A. Med bakpanelen liggende på ett bord, prodenyte remmen i sporet överifrån. B. Rikta in i niten (hunenden bort från patienten) och tryck fast tills den klikar på plats. Gör detta på båda sidorna.	ИНСТРУКЦИИ К КОМПЛЕКТУ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 1. РЕМНИ ДЛЯ ПЛЕЧ А. Med bakpanelen liggende på ett bord, sett inn strøppen gjennom sporet overifrån. B. Rikta in i niten (hunenden bort från patienten) och tryck fast tills den klikar på plats. Gör detta på båda sidorna.	INSTRUÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO KIT 1. 带带 A. 将背带放在桌子上，然后将扣带从上方插入插槽。 B. 对准铆钉(插口端远离患者)并用力按，直到其卡入到位。在两边进行相同的操作。		
2. TORSOKONTROLLSTROP A. Ret nitten (hunenden væk fra patienten) ind på fastgørelsespunktet til torso-kontrollstroppen. Tryk, indtil det klikker på plads. B. Snor remmen gennem åbningen fra undersiden. C. Træk knaphullet til på enden med remmen over plastfestet og knap den på. Træk stramt for at sikre.				2. PAS KONTROLLYHET NA TULOWIU A. Wyrównajcie nitt (żeńskim końcem od pacjenta) w punkcie zaczepienia na pasie ośniedzienego z tyłu swojego korpusu. Pięsteć dźwignięcia, aby zatrzasnięcie się w miejscu. B. Przytrzymajcie gumeny sporek na brzuchu. C. Trekk knapphullet til på enden med remmen over plastfestet. Trekk godt for å sikre.					
3. KLEMMEBORDELSE A. Fjern skruen fra klemmebordelsen, og placér klemmebordelsen, så gevindlysetret kommer gennem åbningen. B. Ret plastfestene ind efter de små huller. Tryk, indtil der klikker på plads, og udskift derefter stængerne.				3. LÝÄVÄLÄTÖN OHJAUISHINNA A. Kohdista nitti (naaraspää poispäin potilaasta) ylävirtauksen ohjaushinhan kinttymiskohdaksi. Paina lujusti, kunnies se napsahtaa paikalleen. Tekee tämä molemmien puolin.					
4. TLOSO INSTRUKTIONER				4. KONTROLLEMRÄMARE A. Fjern skruen fra klembokligen. Snør opp den svarte svarttappen, og plasser klembokligen slik at den gjenstår hylsen kommer gjennom sporet. B. Juster plastfestene med de to små hullene. Trykk til de smekker på plass, og skift deretter ut stærtappene.					
4. FORBEDRELSE A. Fjern den enkle skruen i midten af T-stang beslaget. Fjern klemmen og stængerne. Dør og stram i Aspen LSO. (Instruktioner på aspenmp.com)				5. LÄÄKÄMÄSLUTUNGAN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä ja sulje tietty osa kinnikkeen keskeltä. Irrota puristin ja pylvääät. Aseta ja kiristä Aspen LSO. (Objetti osaiteesta aspenmp.com) Istruktioita seuraavalla aspenmp.com					
5. BYXUMA SYΣΤΗΜΗ A. Διασπάστε την μονάδα στην οποία έχετε την στήση σας στην πλάτη σας. B. Βερταστείτε την μονάδα στην άλλη πλευρά σας.				6. PRYTTOVANIE A. Odpravte sirovicu na srdciu mociwania elementu w ksztalcie litery „T“. Zdejšia sirovicu a skruku. Zaležte i zacisnť Aspen LSO. (Instrukcie na strane aspenmp.com)					
6. VRYDSPANEL VED-ET-FINING A. Losa midterremmen, og fastsæt stængerne, og skub den til siden, indtil den er placeret ved patientens midterlinje. Gemmerstør og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet hejde til 10mm under byrstbenet. Hvis bunnen af støften strækker sig for langt ned, skal du behøve komfort.				7. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä ja sulje tietty osa kinnikkeen keskeltä. Irrota puristin ja pylvääät. Aseta ja kiristä Aspen LSO. (Objetti osaiteesta aspenmp.com) Istruktioita seuraavalla aspenmp.com					
7. TORSOKONTROLLSTROP <td></td> <td></td> <td></td> <td>8. FÄSTE FÖR BRÖSTPANEL A. Sönderrida ryntapanelet och fasta stödpänklen och skub den lateralt till den er placerat vid patientens mittlinje. Skift och stram den senare skruen. B. Justera byrstpanelet höjden till 10 mm under byrstbenet. Om bunnen av stöfpen sträcker sig för långt ned, ska det behöva komfort.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				8. FÄSTE FÖR BRÖSTPANEL A. Sönderrida ryntapanelet och fasta stödpänklen och skub den lateralt till den er placerat vid patientens mittlinje. Skift och stram den senare skruen. B. Justera byrstpanelet höjden till 10 mm under byrstbenet. Om bunnen av stöfpen sträcker sig för långt ned, ska det behöva komfort.					
8. TORSOKONTROLLSTROP <td></td> <td></td> <td></td> <td>9. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä ja sulje tietty osa kinnikkeen keskeltä. Irrota puristin ja pylvääät. Aseta ja kiristä Aspen LSO. (Objetti osaiteesta aspenmp.com) Istruktioita seuraavalla aspenmp.com</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				9. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä ja sulje tietty osa kinnikkeen keskeltä. Irrota puristin ja pylvääät. Aseta ja kiristä Aspen LSO. (Objetti osaiteesta aspenmp.com) Istruktioita seuraavalla aspenmp.com					
9. TRIN MED INDSTILLING <td></td> <td></td> <td></td> <td>10. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				10. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
10. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>11. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä ja sulje tietty osa kinnikkeen keskeltä. Irrota puristin ja pylvääät. Aseta ja kiristä Aspen LSO. (Objetti osaiteesta aspenmp.com) Istruktioita seuraavalla aspenmp.com</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				11. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä ja sulje tietty osa kinnikkeen keskeltä. Irrota puristin ja pylvääät. Aseta ja kiristä Aspen LSO. (Objetti osaiteesta aspenmp.com) Istruktioita seuraavalla aspenmp.com					
11. JUSTERING AF SKUDLER STROPPE <td></td> <td></td> <td></td> <td>12. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				12. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
12. TORSOKONTROLLSTROP <td></td> <td></td> <td></td> <td>13. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				13. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
13. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>14. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				14. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
14. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>15. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				15. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
15. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>16. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				16. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
16. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>17. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				17. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
17. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>18. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				18. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
18. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>19. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				19. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
19. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>20. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				20. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
20. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>21. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				21. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
21. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>22. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				22. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
22. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>23. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				23. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
23. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>24. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				24. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
24. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>25. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				25. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
25. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>26. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				26. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
26. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>27. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				27. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
27. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>28. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				28. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
28. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>29. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				29. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
29. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>30. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				30. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
30. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>31. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				31. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
31. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>32. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				32. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
32. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>33. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				33. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
33. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>34. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				34. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
34. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>35. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				35. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
35. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>36. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				36. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
36. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>37. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				37. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
37. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>38. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				38. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
38. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>39. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				39. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
39. TILBEHØR <td></td> <td></td> <td></td> <td>40. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				40. RYNTAPANEELINEN ASETUS A. Irrota puristin liitimiestä og skub den til siden, og stram den midterste skruen. B. Juster byrstpanelet til aluminiumsnittemmer med hjælp af forbindelsestappene, og stram den, indtil den sidder tæt.					
									