

SELECTION® ortoser utvecklade för HÄNDER & FINGRAR!

- Komponerad för att optimera funktion och komfort
- Material under ständig utveckling
- Mjuk insida
- Material som andas
- Torkar snabbt
- Lågabsorberande
- Tvättas i maskin
- Klippas i utan att fransa
- Materialen testade för kroppsnära textilier enligt SGS
- Anpassad funktion där det behövs
- Ger en bekväm och sval känsla
- Inga hårda kanter
- Snörning för anpassningsbar storlek och anpassat stöd
- Genom den låga profilen hos ortoserna kan dessa användas under handskar



SELECTION®


ett material som utvecklats bland annat för hand- och handledsortoser.

SELECTION® POWERNET

Funktionsbäraren som är den inre textila nätstrukturen. Denna ger materialet sin perfekta elasticitet och återhämtning för ett bra och följsamt stöd.

SELECTION® AIR

Tunt, mjukt och 100% luftgenomsläppligt material. Används i de delar av ortosen där textilen inte skall kännas och inte får vara varm. Ger en extra följsam funktion.

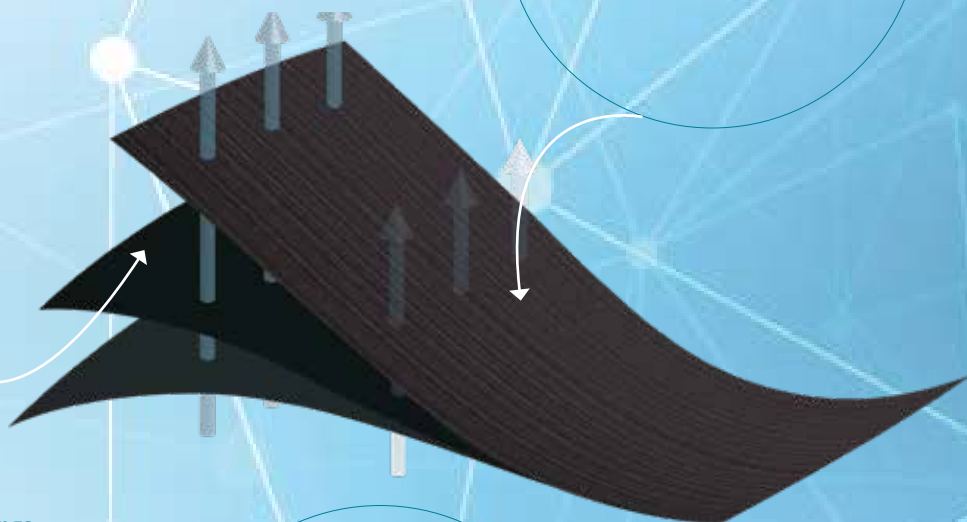

SELECTION®

Alla våra material testas omsorgsfullt vid internationellt godkänt testinstitut för att säkerställa att de inte innehåller några ämnen som kan vara skadliga för barn eller vuxna.

De kARBORRband som används i produkterna är nogra utvalda för att passa för just sin funktion och har även testats för att kunna öppnas och stängas många gånger utan att slitas ut.

SELECTION® AIR & POWERNET

Kombinationen ger en anatomisk följsamhet som tillåter rörelse där ingen inskränkning behövs och stabilitet där det behövs. En perfekt passform med mjuk insida och slitstark utsida. Elegant med hög komfort.

SELECTION® Fingerloop

En tvillingortos som effektivt håller ihop två eller flera fingrar; så att det starkare fingret kan hjälpa det svagare som stöd, skydd och/eller för att öka rörelseomfånget. Kan även användas som en statisk progressiv skena för ökat rörelseomfång i DIP-leden.

Ortosen är tillverkat i 100 % slitstark och snabbtorkande nylon. Svetsad utan sömmar och därför lätt att skära till för en personlig passform. En eller flera bitar kan användas samtidigt. Det halvpreparerade Fingerloop-arket som är 10 cm brett kan enkelt klippas till enskilda band i önskad bredd med en sax.

Avsedd användning

Stöd för fingrarna efter till exempel skada, operation, stabila frakturer, metacarpalfrakturer, kroniska smärttillstånd, stukningar, ledförlitning och kontrakturer.



Art.nr.	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Antal/Förp
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15.5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	-	10 cm	15,5 cm	1

SELECTION® Tumortos SOFT

Smidig och elastisk tumortos som avlastar tummens leder och ger ett lätt stöd. Vid lindrigare CMC- och MCP tillstånd ges avlastning men medger ett aktivt "pinch-grepp". Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Avsedd användning

Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig CMC-I artros.



Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets Handled
35200	Svart	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm
35200	Svart	Vä/Hö	Small	13-15 cm
35200	Svart	Vä/Hö	Medium	15-17 cm
35200	Svart	Vä/Hö	Large	17-20 cm
35200	Svart	Vä/Hö	X-Large	>20 cm
35201	Beige	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm
35201	Beige	Vä/Hö	Small	13-15 cm
35201	Beige	Vä/Hö	Medium	15-17 cm
35201	Beige	Vä/Hö	Large	17-20 cm
35201	Beige	Vä/Hö	X-Large	>20 cm

SELECTION® Tumortos RIGID

Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. Utformningen ger stöd åt thenarmuskulaturen, håller tummen i neutralläge samt avlastar CMC- och MCP och medger ett aktivt "pinch-grepp". Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Avsedd användning

Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig till moderat CMC-I artros.



Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets Handled
35202	Svart	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm
35202	Svart	Vä/Hö	Small	13-15 cm
35202	Svart	Vä/Hö	Medium	15-17 cm
35202	Svart	Vä/Hö	Large	17-20 cm
35202	Svart	Vä/Hö	X-Large	>20 cm
35203	Beige	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm
35203	Beige	Vä/Hö	Small	13-15 cm
35203	Beige	Vä/Hö	Medium	15-17 cm
35203	Beige	Vä/Hö	Large	17-20 cm
35203	Beige	Vä/Hö	X-Large	>20 cm



SELECTION® SHORT

Smidig, elastisk handledsortos utan skena men med förstärkning på volarsidan. Ortosen som är kortare än SELECTION® Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger kompression. Den har en låg skärning i handen för att följa handens naturliga böjveck. Eftersom snöringen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Låsningssystem med snöring är lätt att öppna och stänga med en hand. Reglerbart tumband som utgår volart. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Ortosens längd är 13 cm på volarsidan.

Avsedd användning

Stöder och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer, vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga och/eller monotona rörelsemoment

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets Handled
35222/35223	Svart/Beige	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm
35222/35223	Svart/Beige	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm
35222/35223	Svart/Beige	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35222/35223	Svart/Beige	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35222/35223	Svart/Beige	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm



SELECTION® SOFT

SELECTION® Soft är en medium-stabil handledsortos som har den formade CS-skena på volarsidan och en mjukare (1 cm bred) rak plastskena på dorsalsidan. Båda skenorna är uttagbara. Den har en låg skärning i handen för att följa handens naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand och möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Eftersom snöringen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Reglerbart tumband som utgår volart. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Ortosens längd är 18 cm på volarsidan.

Avsedd användning

Då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets Handled	Underarmsmått*
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	XX-Large	23 - 26 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Vä/Hö	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm

*endast på plus-storlekar vid bredare underarm.



SELECTION® MULTIOPEN

DUBBEL låsningsfunktion

SELECTION® Multiopen är en medium-stabil handledsortos med dubbel låsningsfunktion. Den kan öppnas upp helt och sen löst förslutas med kardborrlåsning och spännas åt med snörning.

- Användaren kan själv välja om den skall öppnas helt varje gång ortosen tas på/av eller om bara snörningsfunktionen skall användas.
- Ortosen har en låg skärning i handen för att följa handens naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt.
- Den tvådelade snörlåsningen i kombination med kardborrlåsningen möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm.
- Eftersom snörningen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Reglerbart tumband som utgår volart.
- Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Tillverkad i det luftiga och bekväma SELECTION®-materialet med alla de funktioner som detta medför.
- Ortosen är 22 cm lång, dvs 4 cm längre än en SELECTION® Soft 35204.
- Den har en formbar aluminiumska på volarsidan som är urtagbar.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets Handled
35209	Svart	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm
35209	Svart	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm
35209	Svart	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35209	Svart	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35209	Svart	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm
35209	Svart	Vä/Hö	XX-Large	23 - 26 cm





SELECTION® RADIALIS TUMDEL

SELECTION® Radialis Fingerdel och Tumdel säljs separat för att kunna kombineras på bästa sätt. SELECTION® Radialis Tumdel är avsedd att användas vid Radialisparees (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig. Avsedd att kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 och 35209.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått
35216	Svart	Vä/Hö	Small	3 - 4 cm
35216	Svart	Vä/Hö	Large	5 - 6 cm

Mått: Längd ledcentrum MCP I – ledcentrum IP I.



SELECTION® RADIALIS FINGERDEL

Radialis Fingerdel består av två delar vilket gör det enklare att ta på och anpassa till bästa passform. Fingerdelen fästs mot ortosens mjuka material på handryggen. Enkel att montera och bekväm att använda. Kan med fördel kombineras med Radialis Tumdel. Avsedd att kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 och 35209.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets MCP 2-5
35217	Svart	Vä/Hö	Small	17 - 20 cm
35217	Svart	Vä/Hö	Medium	20 - 23 cm
35217	Svart	Vä/Hö	Large	23 - 27 cm





SELECTION® RIGID

SELECTION® Rigid är en medium-stabil handledsortos med tumdel. Ortosen har den formade CS-skena på volarsidan och en mjukare (1 cm bred) rak plastskena på dorsalsidan. Båda skenorna är uttagbara. Tumdelen ger genom sitt stabilare material ett bra stöd. Utformningen av tumdelen ger stöd åt thenarmuskulaturen och håller tummen i neutralläge. Den låga skärningen i handen följer handens naturliga böjveck. Eftersom snöringen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand och möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Reglerbart tumband som utgår volart. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Ortosens längd är 18 cm på volarsidan.

Avsedd användning

Då handleden och tummen behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets Handled
35206	Svart	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm
35206	Svart	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm
35206	Svart	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35206	Svart	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35206	Svart	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm
35206	Svart	Vä/Hö	XX-Large	23 - 26 cm

SELECTION® OPEN WRIST

SELECTION® Open Wrist är en helt öppen modell för att underlätta på- och avtagning av ortosen. En medium-stabil handledsortos som har den formade CS-skena på volarsidan och en mjukare (1 cm bred) rak plastskena på dorsalsidan. Båda skenorna är uttagbara. Den har en låg skärning i handen som följer handens naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt. Reglerbart tumband som utgår volart. Det extra "hållbandet" på insidan kan klippas bort om man önskar det. Ortosen har ett integrerat stabiliserande draggrundband och tas enkelt på med en hand. Ortosens längd är 18 cm på volarsidan.

Avsedd användning

Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets Handled
35207	Svart	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm
35207	Svart	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm
35207	Svart	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35207	Svart	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35207	Svart	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm





EXTRA BAND

Till våra handledsortoser finns extra band som kan fästas i kardborrbandet för att öka stödet runt handleden. Bandet (46032) är vänderbart och passar både till SELECTION® och VISSION™ produkterna. Kan klippas till önskad längd utan att det fransar sig. Testat för att hålla att öppna och stänga många gånger. Modell 35212 och 35213 passar till SELECTION® modellerna.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Bredd	Förp.
46032	Svart	Bilateralt	En storlek	5,5 cm	1 st.
35212	Svart	Bilateralt	En storlek	5 cm	1 st.
35213	Beige	Bilateralt	En storlek	5 cm	1 st.

35212



35213



46032

SELECTION® CS-SKENA

Vår blå CS-skena, tillverkad av Polypropylen (PP), är anatomiskt förformad i handens viloställning för att, enligt antropometrisk data, passa en majoritet av en vuxen befolkning. Kan omformas genom att hettas upp med värmepistol. Skenan är uppbyggd av tunnare och kraftigare partier där det kraftigaste stödet ligger vid handleden för att sedan tunnna ut och avslutas i skenans lätt utböjda ändrar som inte ger obehagligt tryck. Detta ger ett dynamiskt stöd med god stabilisering, där det önskas.



Art. nr.	Färg	Storlek	Antal	Modell
35210	Blå	En storlek	10 st/fp.	Volar
32511	Blå	En storlek	10st/fp.	Dorsal

SELECTION® BROMSA

Selection bromsa handled är avsedd att begränsa rörelsen i handleden för att avlasta handextensorerna, stödja handleden och minska smärta vid bl.a. tennisarmbåge. Ortosen har mjuka plastskenor på handryggen, justerbart band för tummen och SELECTION® snörstängning. Stödet kan anpassas genom att välja att ha båda skenorna eller bara en i fickan. Snörstängningen gör att ortosen bättre sluter om handen och ger en bättre passform. Ortosens längd är 15 cm på volarsidan.

Avsedd användning

Lateral epikondylit, överrörlighet, reumatiska problem, ospecificerad smärta.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets Handled
35208	Svart	Vä/Hö	X-Small	<11 cm
35208	Svart	Vä/Hö	Small	11-14 cm
35208	Svart	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35208	Svart	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35208	Svart	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm



Motståndet kan regleras genom att använda olika många skenor eller ingen skena.



SELECTION® Tumortos BARN

Mjuk och skön tumortos avsedd för barn. Ortosen är avsedd att positionera tummen i en funktionell ställning för att underlätta greppfunktionen och stödja CMC- och MCP I lederna. Designen omsluter thenarmuskulaturen och ger stöd samt förbättrar positioneringen. Den turkosa öglan i slutet av handledsbandet underlättar att ta av ortosen med ett enkelt grepp. Tumgreppet är justerbart och kanterna kan trimmas vid behov.

Avsedd användning

Positionering av handen efter Brakialplexus neuropatier (BPN), Spastisk hand vid Cerebral Pares. Arthrogryposis. Reumatiska sjukdomar.



Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets Handled	Handflats-mått
35300	Svart	Vä/Hö	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm
35300	Svart	Vä/Hö	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm
35300	Svart	Vä/Hö	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm
35300	Svart	Vä/Hö	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm
35300	Svart	Vä/Hö	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm

SELECTION® BARN

Medium stabil handledsortos speciellt utvecklad för barn. Ortosen har en uttagbar aluminiumska på volarsidan och två dragband för en enkel och steglös låsning som även möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Eftersom snöringen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Tumbanden är justerbara och kanterna är mjuka. Färgdetaljerna är valda för att tilltala barnen. Ortosens längd är 11 - 17,5 cm på volarsidan.

Avsedd användning

Reumatiska problem. Neurologiska skador där handleden behöver stöd och/eller korrigerig. Efter avslutad gipsbehandling. Inflammationer.



Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled	Handflats-mått	Längd på volarsidan
35305	Svart	Vä/Hö	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm
35305	Svart	Vä/Hö	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm
35305	Svart	Vä/Hö	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm
35305	Svart	Vä/Hö	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm
35305	Svart	Vä/Hö	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm

SELECTION® OPEN WRIST BARN

En medium-stabil handledsortos för barn som har en uttagbar formad aluminiumska på volarsidan. Ortosens unika egenskap med två tumband, ett som fästs runt tummen och ett som fästs på handryggen, ger en bättre kontroll av tummens abduktion och adduktion. SELECTION® Open Wrist Barn är avsedd att immobilisera CMC-led och handled i syfte att minska smärta, vägleda handleden till ett neutralt läge och vid behov stödja en handled efter trauma/operation. Ortosens längd är 16 cm på volarsidan.

Avsedd användning

Reumatoid artrit, CP, efter trauma/operation.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled	Handflats-mått	Längd på volarsidan
35306	Svart	Vä/Hö	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm
35306	Svart	Vä/Hö	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm
35306	Svart	Vä/Hö	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm



SELECTION® Ulnar Deviationsortos

SELECTION® Ulnardeviationsortos är avsedd att förbättra fingrarnas position för att ge en bättre handfunktion och därmed ett funktionellt grepp. Ortosen avlastar strukturer samtidigt som den har en smärtlindrande effekt. Den ger stöd åt MCP- och PIP lederna, samtidigt som den förbättrar fingerextensorerens dragriktning. Ortosen är designad så att materialet går långt ut på ulnarsidan över 5te MCP-leden, för att ge bästa möjliga stöd, motverka dragriktningen och fördela trycket. Det går att fästa kardborrebanden var som helst i materialet vilket innebär att det inte finns några begränsningar var banden placeras för att uppnå den optimala dragriktningen. Eftersom ortosen är så tunn och smidig kan den enkelt kombineras med en handledsortos när ytterligare stöd behövs. Specialdesignade förstärkningar av lågtemperaturplast (non-coated) kan fästas direkt mot ortosen.

Användningsområde:

För patienter med artros. Ulnardeviation kan förekomma vid inflammatoriska och degenerativa sjukdomar såsom RA. Selection Ulnardeviation kan även användas vid överrörliga leder och vid svag muskulatur med syfte att erbjuda mer stadga. Skall inte användas i samband med fixerade kontrakturer.

Mått:

Omkrets MCP 2-5

Art.nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö	Mått
35218	Svart	X-Small	Vä/Hö	13-16 cm
35218	Svart	Small	Vä/Hö	16-19 cm
35218	Svart	Medium	Vä/Hö	19-22 cm
35218	Svart	Large	Vä/Hö	22-25 cm



Inom Camp Scandinavia är produktutveckling en central funktion. Tillsammans med våra kunder och våra produktspecialister arbetas det flitigt på att ta fram ny material, nya lösningar som ger bättre produkter för användaren. Några andra produkter som vi vill poängtera och som finns på vår hemsida och i vår produktkatalog är:

VISSION™ en serie med tum-och handledsortoser i ett stabilare resårmaterial med extra mjuk insida.

VISSION NEO™ tumortoser i kort och lång modell. Skön syntetisk och latexfri neopren. Passar att använda i våta miljöer.

