

Patella



Patella

Patella är speciellt framtagen för behandling av olika typer av patella problem. Produkten på bilden har patellakudden placerad på lateralsidan. Den är lätt stabiliserande och har rostfria spiralfjädrar i sidorna.

- Flyttbar patellakudde där draget enkelt kan justeras
- Justerbar lår- och vad omkrets
- Extra mjukt och följsamt material i knävecket
- Pådragsöglor i överkant
- Silikonrand på insidan, som hindrar migration
- Formsydd patellaöppning
- Ger utmärkt kompression, förbättrar proprioceptionen och ökar genomblödningen i området

Minor



Minor Wrap



Minor

Minor finns i två versioner, en tub och en "wrap around" modell som är helt öppen. Båda modellerna är lätt stabiliserande och har rostfria spiralfjädrar i sidorna.

- Justerbar lår- och vad omkrets
- Extra mjukt och följsamt material i knävecket
- Pådragsöglor i överkant
- Silikonrand på insidan, som hindrar migration
- Formsydd patellaöppning
- Ger utmärkt kompression, förbättrar proprioceptionen och ökar genomblödningen i området

© Camp Scandinavia AB Juni 2012

SELECTION®

Textila knäortoser på ett helt nytt sätt!





FEM funktionella modeller som täcker in alla behov!

## Utmärkt passform

Den underliggande anatomiska strukturen har varit vägledande under design- och utvecklingsarbetet för SELECTION knä. Formen på patellaöppningen är framtagen för att matcha den anatomiska formen på patella.

Det bakre nedre bandet har placerats för att ge bästa möjliga grepp och därför sitter det högt uppe på underbenets muskelbuk - gastrocnemius. Detta förhindrar att ortosen glider ner.

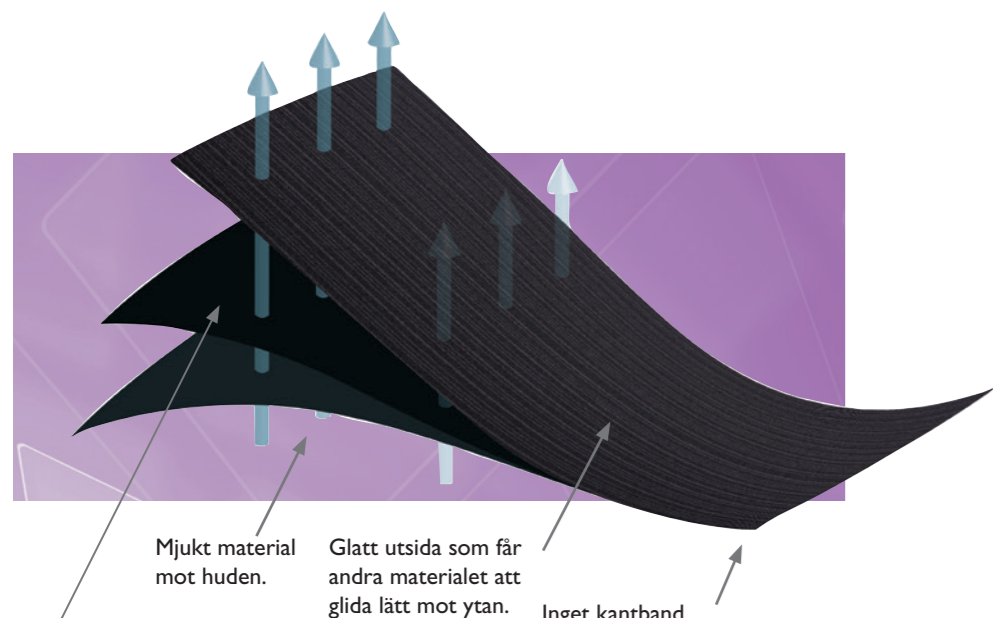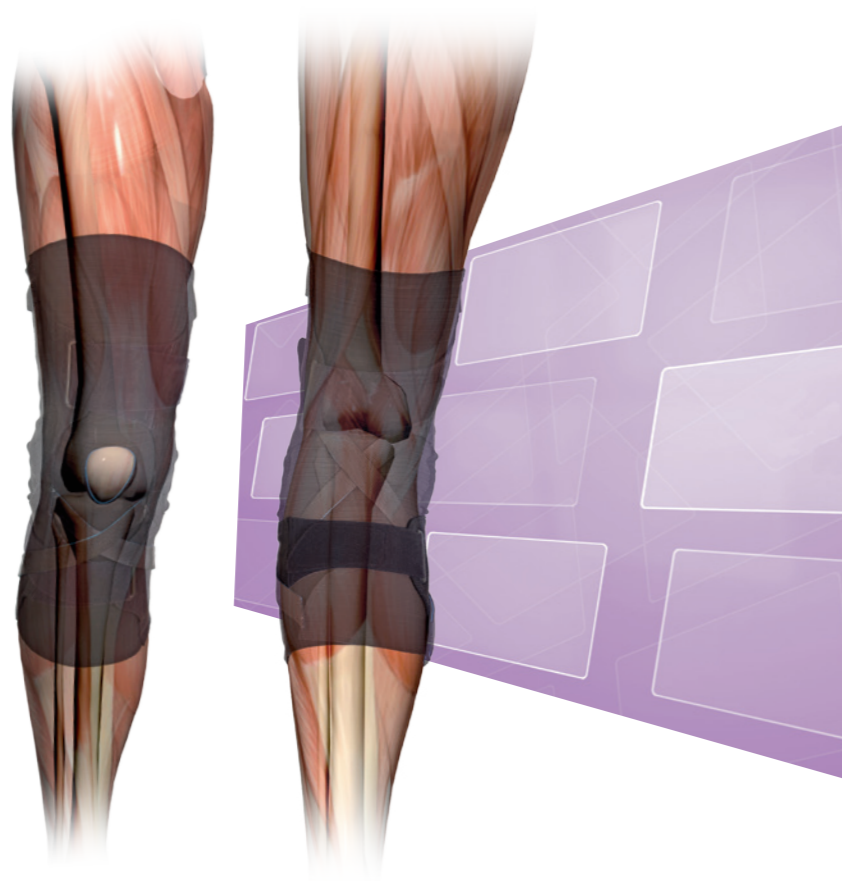

Funktionsbäraren hjälper materialet att andas och transportera bort fukt.

Mjukt material mot huden.

Glatt utsida som får andra materialet att glida lätt mot ytan.

Inget kantband behövs. Kan klippas utan att det fransar (35701).

För SELECTION har vi valt att jobba med ett nytt och annorlunda material som möter brukarens önskemål. SELECTION-materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Kardborrbanden och fästytorna är extra smidiga för att ge så låg bygghöjd som möjligt. Eftersom materialet inte behöver något kantband är det möjligt att klippa i det utan att det fransar upp sig (35701).

## Anpassad funktion

## Optima



Optima



Optima Wrap

Optima finns i två versioner, en tub och en "wrap around" modell som är helt öppen. Knäortoserna är stabiliserande och avlastande med inställbar led. Båda modellerna har flera inbyggda funktioner vilket medför ett brett användningsområde. Vissa funktioner kan enkelt plockas bort om dom inte behövs.

- Avtagbart kryss för begränsning av översträckning
- Stoppband för ökad A-P stabilitet under patella
- Leder med inställbart rörelseomfång
- Justerbar lår- och vad omkrets
- Fyra separata formsydda band med integrerad D-ring
- Extra mjukt och följsamt material i knävecket
- Pädragsöglor i överkant
- Silikonrand på insidan, som hindrar migration
- Formsydd patellaöppning
- Ger utmärkt kompression, förbättrar proprioceptionen och ökar genomblödningen i området


## Enkelt för användaren

Optima modellerna (35702 och 35703) har båda flera inbyggda extra funktioner som ger en fulländad ortos med alla tänkbara möjligheter.



Lederna har inbyggda hål så att det enkelt går att fästa översträckningsbandet direkt på leden och enkelt ta bort bandet om det inte behövs. Översträckningsbandet stängs sedan på lårets framsida så att det skall vara smidigt för brukaren att ta på och av ortosen och även att reglera "draget" för översträckning.

Under patella finns två korslagda band. Dessa har som funktion att ge ökad stabilitet för knäleden även i A-P. Om inte dessa två band behövs kan dom enkelt klippas bort

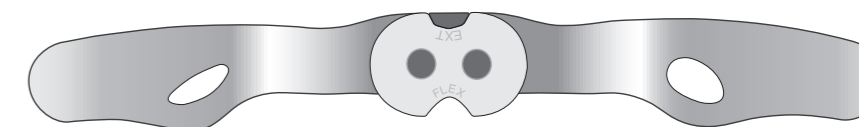

Optima-modellerna levereras med en inställbar R.O.M. led. Leden är något förböckad för bästa passform. Tillsammans med ortosen följer olika insatser för reglering av rörelseomfånget. Orto sen levereras med leden inställd i 10° flexion.

