

CAMP[®]

MultiStatic

**BEHANDLING AV
KORRIGERBARA
KONTRAKTURER**




MultiStatic

EFFEKTIV BEHANDLING AV KORRIGERBARA KONTRAKTURER

MultiStatic-leden är avsedd att användas för behandling av korrigerbara kontrakturer, både hos vuxna och barn. Leden möjliggör snabb, effektiv och adekvat statisk behandling av kontrakturer. Leden arbetar efter HLBS-principer (High Load Brief Stretch). Vinkeln för leden sätts av en excentrisk axel. MultiStatic-leden är avsedd att användas för ortoser som inte är vikt bärande. Vi rekommenderar att kombinera MultiStatic-leden tillsammans med en gångjärnsled på den motsatta sidan för att säkerställa vridstyvhet och rotation av ortosen.

Fördelar

- Optimal position av ledaxeln; lätt att justera vinkeln
- Kan användas både till flexion och extension
- Fri inställning mellan + 120 ° till -120 °
- Integrerade skenor
- Fungerar Bilateralt
- Leden är tillverkad i rostfritt stål

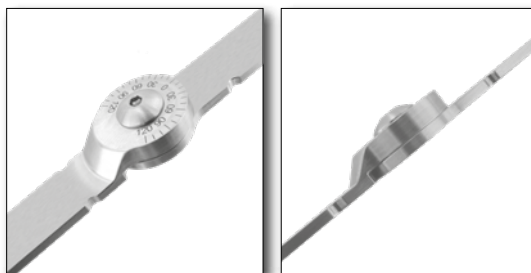

Art.nr.	Storlek	Bredd	Längd	Höjd	Diameter	Vikt
696890000	X-Small	9 mm	100 mm	6,5 mm	11 mm	14 g
696900000	Small	12 mm	400 mm	8,5 mm	19 mm	83 g
696910000	Medium	16 mm	400 mm	9,5 mm	25 mm	121 g
696920000	Large	19 mm	400 mm	10,5 mm	30 mm	151 g



MultiStatic Gångjärnsled

Denna frirörliga gångjärnsled används tillsammans med MultiStatic-Behandlingsled för att säkerställa vridstyvhet och bästa funktion.

Fördelar

- Helt fri led
- Enkelledad gångjärnsled
- Tillverkad av rostfritt stål



Art.nr.	Bredd	Längd	Höjd	Diameter	Vikt
696950000	12 mm	400 mm	11 mm	18 mm	105 gram
696960000	16 mm	400 mm	11 mm	22 mm	140 gram

Läs mer på www.camp.se eller kontakta kundsupport på 042-252701