

**CAMP**<sup>®</sup>

# FJÄDERLÄTT & LUFTIG



**X-LITE<sup>®</sup> CLASSIC  
NYA FÄRGER!**



## Vi är stolta över att presentera vårt välkända X-LITE® CLASSIC material i två nya attraktiva färger; Antracit och Royal Blue.

- X-LITE® är ett luftigt lättviktsmaterial som är designat för att uppfylla alla behov vid framställning av gipsskenor, cirkulärgips och ortoser.
- Materialet är tillverkat av en 100% bomullsväv, som impregnerats med en giftfri termoplast. Alla reaktiva ämnen i termoplasten är färdighärdade, vilket betyder att de inte avger någon form av farliga ångor. X-LITE® kan därför appliceras utan extra skydd såsom handskar och speciellt utsug i rummet.
- När gipset avlägsnas med gipssåg avges inga farliga ångor eller dammpartiklar och utsug är inte nödvändigt. Det är säkert för personalen att arbeta med X-LITE, inklusive gravida, asmatiker och allergiska personer.
- X-LITE® uppfyller internationella standarder för biologisk nedbrytbarhet och sorterar under ofarligt avfall. Ett verkligt miljövänligt alternativ!
- X-LITE® värms i vattenbad vid 70°C.
- Materialet börjar härda efter 1 minut och är fullt härdat efter 20 minuter.

X-LITE® är en giftfri och miljövänlig produkt som ger en säker arbetsmiljö och skyddar vår natur.




100% bomull

+




Ofarlig Polymer

=

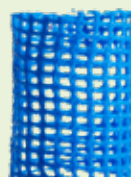

X-LITE®

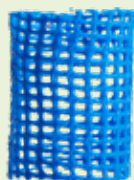

X-LITE®

+



Kompost

=



Co2

&



Vatten



Vår miljö - vår framtid - ditt val!

## FUNKTIONER OCH FÖRDELAR MED X-LITE® CLASSIC

- Erbjuder ett ultralätt, luftigt och ventilerande material
- Låg profil men starkt
- Formbart efter 10 sekunder i vattenbad
- Lägg ett extra lager för ytterligare styrka
- Materialet kan återuppvärmas obegränsat antal gånger
- Avlägsna överskottet av vatten och anlägg direkt på patienten
- Inga fingermärken
- Velcro, polster och annat fäster lätt och permanent på materialet



Art. Nr	Bredd	Längd	Färg	Förpackning
64136 0000	7,5 cm	1,8 m	Antracit	5 rullar
64146 0000	10 cm	1,8 m	Antracit	5 rullar
64168 0000	15 cm	1,8 m	Antracit	2 rullar
64302 0000	20 cm	37,5 cm	Antracit	8 ark
64303 0000	45 cm	50 cm	Antracit	4 ark
64255 0000	15 cm	10 m	Antracit	1 dispenser
64137 0000	7,5 cm	1,8 m	Royal Blue	5 rullar
64147 0000	10 cm	1,8 m	Royal Blue	5 rullar
64169 0000	15 cm	1,8 m	Royal Blue	2 rullar
64304 0000	20 cm	37,5 cm	Royal Blue	8 ark
64305 0000	45 cm	50 cm	Royal Blue	4 ark
64256 0000	15 cm	10 m	Royal Blue	1 dispenser




# FJÄDERLÄTT & LUFTIG

## X-LITE® PLUS KANTBAND

Kantbandet ger ge en mjukare och bekvämare kant på skenor. Med en baksida av Premium-material ger det extra stabilitet till skenan. Fungerar väl tillsammans med allt vårt material inkluderat 3D-LITE. Värm i 70°C vattenbad.

Art. Nr	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64235 0000	Vit	25 mm	4 m	Dispenser box
64236 0000	Röd	25 mm	4 m	Dispenser box
64237 0000	Blå	25 mm	4 m	Dispenser box
64238 0000	Svart	25 mm	4 m	Dispenser box
64239 0000	Hot Pink	25 mm	4 m	Dispenser box

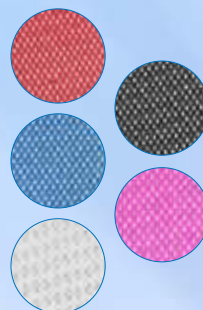

## X-LITE® TERMOPLASTISKT KARBORRBAND

X-LITE® Karborrebandet har en baksida av termoplast som vid uppvärmning laminerar direkt mot X-LITE® och 3D-LITE™ material. Baksidan värms upp med varmluftpistol. Mjuka karborreband, efter eget val, monteras därefter.

Art. Nr	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64195 0000	Vit	50 mm	50 cm	5 Ark
64196 0000	Vit	50 mm	5 m	1 Dispenser
64197 0000	Svart	50 mm	50 cm	5 Ark
64198 0000	Svart	50 mm	5 m	1 Dispenser

**NYHET!**  
**FINNS NU ÄVEN I SVART!**

