

CAMP[®]

SELECTION[®]

Textila Ryggortoser
på ett helt nytt sätt!



TRE funktionella modeller som täcker in alla behov!

SUPPORT FOR BETTER LIFE

Ryggstöd för alla kroppstyper!


Selection Rygg är det senaste tillskottet i vår populära Selection-serie. Modellerna finns för alla kroppstyper, från en låg modell för korta personer till en vidare modell för de som behöver extra stöd för magen. Alla modellerna har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.



"Fingerstraps" för enkel av- och påtagning.



Ficka på insidan för enkel låsning

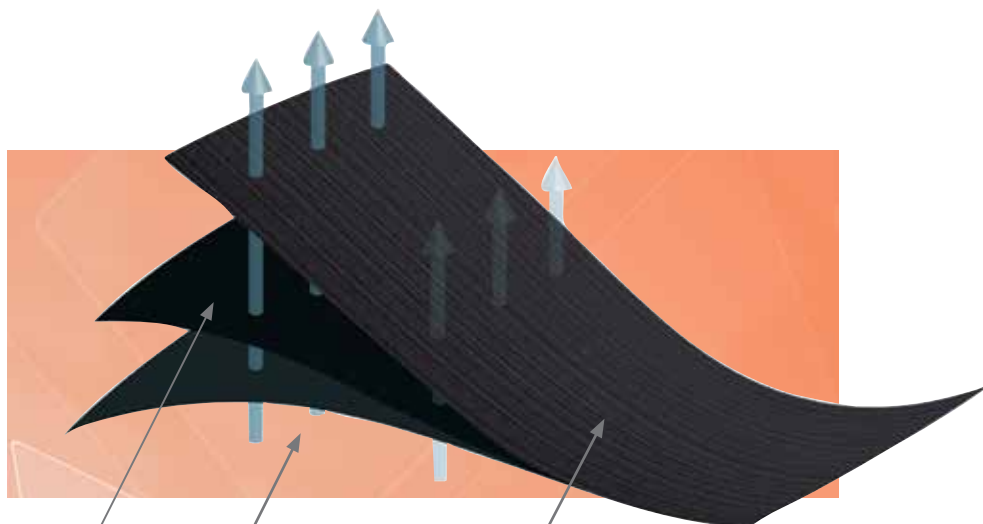

Mjukt material mot huden.

Glatt utsida som får andra materialet att glida lätt mot ytan.

Funktionsbäraren hjälper materialet att andas och transportera bort fukt.

Anpassad funktion

För SELECTION har vi valt att jobba med ett nytt och annorlunda material som möter brukarens önskemål. SELECTION-materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Kardborrbanden och fästytorna är extra smidiga för att ge så låg bygghöjd som möjligt.

SELECTION®

Selection Rygg Låg



Selection Rygg Regular & Låg

Art.nr	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35400	Svart	X-small	75-85 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Small	85-95 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Medium	95-105 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Large	105-115 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	X-Large	115-125 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	XX-Large	125-140 cm	19 cm	12 cm

Selection Rygg Låg och Regular

passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen.

Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna.

Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri.

På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan.

Selection Rygg Regular



Selection Rygg Regular Bak



Art.nr	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35401	Svart	X-small	75-85 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Small	85-95 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Medium	95-105 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Large	105-115 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	X-Large	115-125 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	XX-Large	125-140 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	XXX-Large	140 - 160 cm	23 cm	16 cm



Selection Rygg Wide

Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna Selection-materialet.

Denna modell är speciellt framtagen för personer med ett kraftigt magparti som behöver lyft och stöd.

Förslutningen framtill är delad i två för att underlätta vid påtagning och för att kunna justera höjd fram. Ortosen har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen.

Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar rygg-raden helt fri.

På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband.

Art.nr	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35402	Svart	Small	85-95 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Medium	95-105 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Large	105-115 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	X-Large	115-125 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	XX-Large	125-140 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	XXX-Large	140-160 cm	31,5 cm	25 cm