

CAMP®

Stomacare

Bekvämt och tryggt för en enklare vardag

Nyhet!



Stomacare standard Plus

Nyhet!



Stomacare med
85 mm stomi-öppning

Stomacare


Bekvämt och tryggt för en enklare vardag

Stomacare är en elastisk stomigördel som ger stöd och fixation av stomipåsen, kompression av bålen vid försvagad bukmuskulatur samt förebygger och lindrar prolaps/bråck i ärr- och stomiområdet.

Gördeln passar både rak och midjesvängd figur. Den är tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med en elastisk söm för optimal passform. Området kring öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Gördeln är försedd med skyddsband över öppningen.

Stomacare finns i tre höjder; 10 cm, 15 cm och 22,5 cm samt med tre olika diametrar för stomiöppningen; 60 mm, 72 mm och **nytt för i år är 85 mm** vilket underlättar för anpassningen till olika storlekar på stomipåse.

Nyhet! Nu även med 85 mm stomi-öppning!

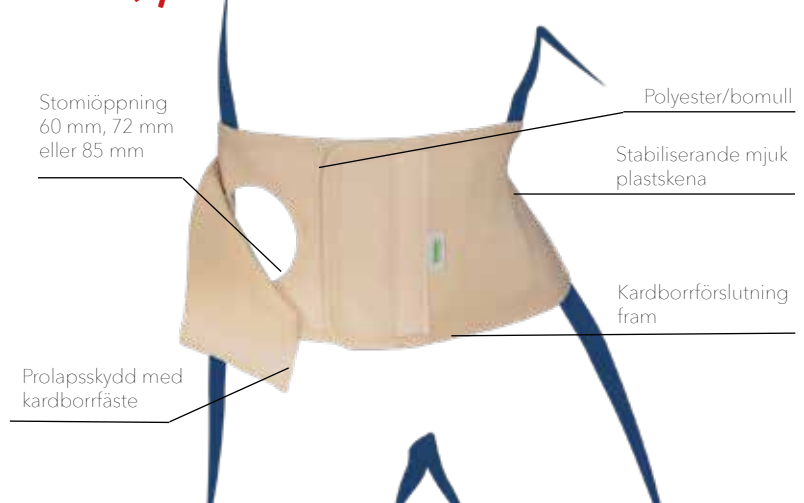

Stomacare ^{PLUS} bälten

COOLMAX®

Nästa generation av stomibälten

Förbättrad komfort med Coolmax

Den nya "Plus"-serien är tillverkad av ett andningsaktivt Coolmax-material som garanterar maximal svettavledning. Den fukt som frigörs transporteras bort från kroppen genom fiberns ihåliga kärna. Samtidigt håller luften i den ihåliga kärnan bäraren varm. Fukten sprids och avdunstar fyra gånger snabbare än med bomull. Detta håller kroppen behagligt torr - även under fysiska aktiviteter.

Skräddarsydd för individuella behov

För att möta individuella behov finns Stomacare Plus i flera olika modeller och höjder. Den gråa färgen är diskret även under ljusa kläder.

Stomacare Plus levereras i med en integrerad Multiflex-ring eller i en variant där storlek och form på stomi-öppningen kan anpassas utifrån patientens behov*.

Coolmax-materialet bidrar till hög komfort och angenäm kroppstemperatur.

Integrerat skydd för framfall.

En tunn och oelastisk frontdel ger optimalt stöd för bukväggen.

Den ljusgrå färgen är diskret

Finns i olika höjder för att möta individuella behov.

* Varierar beroende på modell

Stomacare Standard Plus







Stomacare standard plus är tillverkad i Coolmax-material som andas och minskar risken för fukt innanför gördeln. Detta håller kroppen bekvämt torr - även under fysisk aktivitet. Den snygga grå färgen är diskret även under ljusa kläder. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. En integrerad multiflexring (i plast) runt hålet gör det enklare att hålla rent samt ger en säkrare koppling med mindre risk för läckage. Den tunna och oelastiska frontdelen ger ett optimalt stöd för bukväggen för att förhindra prolaps och bråck.

Egenskaper:

- Integrerad Multiflex-ring i plast
- Stabiliserande ribbor förhindrar veckbildning och ger stöd samt optimal passform.
- Velourpanel för att fästa tillbehör som t.ex. Protector eller BellyBag
- Material: Latexfri, Coolmax (polyester, polyamid, elastan), Velour (polyester), plast (POM, TPE).
- Färg: ljusgrå



Specifikationer

 15 och 23 cm	 72 och 85 mm	 70 to 140 cm		
				

Stomacare EasyCut Plus







EasyCut Plus har samma egenskaper som Stomacare Standard Plus. Med EasyCut gördeln är det lätt att applicera och justera stomi-öppningen när bältet sitter på plats på patienten. Detta är speciellt användbart för patienter som vårdas i hemmet. Efter individuella behov kan stomi-öppningens position, form och diameter anpassas med en sax. En mall för olika former och storlekar följer med gördeln. Materialet fransar sig inte och är utformat för att ge patienten ett optimalt stöd. EasyCut Plus finns i storlekar från 50 - 140 cm och i höjderna 10cm, 15cm, 19cm och 23 cm

Egenskaper:

- Coolmax-materialet bidrar till hög komfort och en behaglig kroppstemperatur.
- Diskret ljusgrå färg
- En tunn och oelastisk frontdel ger optimalt stöd för bukväggen och förhindrar prolaps och bråck.
- Integrerat skydd för framfall.
- Tillgänglig i fyra höjder.



Specifikationer

 10, 15, 19 och 23 cm	 Individuell	 50 till 140 cm		
				

Stomacare Easy Opener





Stomacare EasyOpener har en integrerad förslutning under stomi-öppningen som förenklar byte av stomipåse, då gördeln inte behöver tas av. Denna modell lämpar sig inte för patienter med ett mycket högt abdominalt tryck, då det finns risk för hög belastning av stomiöppningens förslutning. Separat modell för vänster respektive höger.

Specifikationer:

- Höjd: 15 cm
- Stabiliserande ribbor för optimal passform.
- Velourpanel för att fästa tillbehör som Protector.
- Material: Latexfri, bälte i polyester och lycra, förstärkningspanel i EVA, stabiliserande ribbor i plast.
- Finns i vit, svart och beige.



Specifikationer

 15 cm	 60, 72 och 85 mm	 70 till 140 cm	 ○ ● ●
--	---	--	--

Stomacare låg, mellan och hög





Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området kring öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningspanel i plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning. Finns i tre höjder; låg, mellan och hög. Mellanvarianten finns även i tre olika färger; beige, vit och svart. Hög och låg finns i vitt.

Egenskaper:

- Finns i tre olika höjder
- Stomi-öppningen är vertikalt centrerad på modeller med höjden 10 och 15 cm.
- Stomi-öppningen på den 22,5cm höga modellen är placerad ca 2,5 cm från gördelns nederkant.
- Stabiliserande ribbor för optimalt stöd och passform.
- Velourpanel för att fästa tillbehör som t.ex. Protector eller BellyBag
- Material: Latexfri, bälte i polyester och lycra, förstärkningspanel i EVA, stabiliserande ribbor i plast.
- Finns i vit, beige och svart.



Specifikationer

 10, 15 och 22,5 cm	 60, 72 och 85 mm <small>Stomacare låg, 60 och 72 mm</small>	 70 till 140 cm	 ○ ● ● <small>Stomacare låg och hög finns endast i vit</small>
--	--	--	---

Stomacare Halvfabrikat







Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacron-band som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området kring öppningen för stomin är tillverkat av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Levereras komplett med resårkantband och skyddsband för färdigställande. Kardborrlåsning.

Egenskaper:

- Finns i två olika höjder.
- Individuellt utformad placering för stomi-öppningen
- Stabiliserande ribbor för optimalt stöd och passform.
- Velourpanel för att fästa tillbehör som t.ex. Protector eller BellyBag
- Material: Latexfri, bälte i polyester och lycra, förstärkningspanel i EVA, stabiliserande ribbor i plast.
- Finns i vit och svart.



Specifikationer

 15 och 22,5 cm	 Individuell utformning	 70 till 140 cm	  
--	---	--	---



Stomacare Belt Accessorier

Protector Max

ProtectorMax är ett hårt skydd designat för att stå emot tryck och stötar i dagliga situationer samt vid aktivitet. Den minskar risken för att stomipåsen kommer i kläm eller fastnar i t.ex. byxor och bälten. Den skyddar helt enkelt stomin i de flesta situationer. Den är anatomiskt utformad och tillverkad i ett mjukt formpressat gummiliknande material med mjuka kanter. Insidan har en mjuk polstring som ger en bekväm känsla mot huden. ProtectorMax är helt fri från latex och andra skadliga ämnen. Det elastiska midjebandet är följsamt och formar sig efter kroppens rörelser.






ProtectorMax levereras i ett skyddande fodral som kan användas vid förvaring och som reseetui.

Egenskaper:

- Ett skalformat skydd i anatomisk design, skyddar mot tryck och stötar
- Mjuka kanter och polstrad insida ger bekväm känsla mot huden
- Justerbart elastiskt midjeband ger god passform oavsett kroppsform
- Diskret ljusgrå färg
- Levereras i skyddande fodral
- Material: Latexfri, ABS, TPU, nylon, polyamid, elastan och viskos.



Specifikationer

 11 cm	 14 cm	 70 till 140 cm	 
--	--	--	--

Protector

Skyddet är tillverkat av ABC plast och används för att skydda stomin mot tryck och stötar, framför allt under aktivitet. Passar till Stomacares alla modeller. Fästs enkelt mot gördeln genom karborrband på skyddets baksida

Egenskaper:

- En storlek
- Material: ABS
- Finns i ljusgrå och svart



Stomacare storlekstabell

Stomacare Standard Plus

Art.nr	Diameter	Färg	Vä/Hö	Storlek	Höjd
23326	72 mm	Ljusgrå	Bilateral	S - XXXXL	15 cm
23327	85 mm	Ljusgrå	Bilateral	S - XXXXL	15 cm
23328	72 mm	Ljusgrå	Vä/Hö	S - XXXXL	23 cm
23329	85 mm	Ljusgrå	Vä/Hö	S - XXXXL	23 cm

Stomacare Easycut Plus

Art.nr	Färg	Vä/Hö	Storlek	Höjd
23322	Ljusgrå	Bilateral	XXS - XXXXL	10 cm
23323	Ljusgrå	Bilateral	S - XXXXL	15 cm
23324	Ljusgrå	Bilateral	S - XXXXL	19 cm
23325	Ljusgrå	Bilateral	S - XXXXL	23 cm

Stomacare Easy Opener (beige)

Art.nr	Diameter	Färg	Vä/Hö	Storlek	Höjd
23316	60 mm	Beige	Vä/Hö	S - XXXXL	15 cm
23318	72 mm	Beige	Vä/Hö	S - XXXXL	15 cm
23320	85 mm	Beige	Vä/Hö	S - XXXXL	15 cm

Stomacare Låg

Art.nr	Diameter	Färg	Vä/Hö	Storlek	Höjd
23308	60 mm	Vit	Bilateral	S - XXXXL	10 cm
23309	72 mm	Vit	Bilateral	S - XXXXL	10 cm

Stomacare Mellan

Art.nr	Diameter	Färg	Vä/Hö	Storlek	Höjd
23306	60 mm	Vit/Svart/Beige	Bilateral	S - XXXXL	15 cm
23307	72 mm	Vit/Svart/Beige	Bilateral	S - XXXXL	15 cm
23314/23313/23310	85 mm	Vit/Svart/Beige	Bilateral	S - XXXXL	15 cm

Stomacare Hög

Art.nr	Diameter	Färg	Vä/Hö	Storlek	Höjd
23302	60 mm	Vit	Vä/Hö	S - XXXXL	22,5 cm
23303	72 mm	Vit	Vä/Hö	S - XXXXL	22,5 cm
23304	85 mm	Vit	Vä/Hö	S - XXXXL	22,5 cm

Stomacare Halvfabrikat

Art.nr	Färg	Vä/Hö	Storlek	Höjd
23305	Vit	Bilateral	S - XXXXL	15 cm
23301	Vit	Vä/Hö	S - XXXXL	22,5 cm
23321	Svart	Bilateral	S - XXXXL	15 cm
23319	Svart	Vä/Hö	S - XXXXL	22,5 cm

Stomacare Protector Max


Art.nr	Modell	Färg	Storlek	Midjemått
23296	Protector Max	Ljusgrå	En Storlek	70 - 140 cm
23297	Extra midjeband	Ljusgrå	En Storlek	

Stomacare Protector

Art.nr	Modell	Färg	Storlek
23300	Protector	Ljusgrå	En Storlek
23299	Protector	Svart	En Storlek

Storlek	Midjemått
XXS	50 - 60 cm
XS	60 - 70 cm
S	70 - 79 cm
M	80 - 90 cm
L	90 - 100 cm
XL	100 - 110 cm
XXL	110 - 120 cm
XXXL	120 - 130 cm
XXXXL	130 - 140 cm

Mättet skall tas då patienten ligger ner.

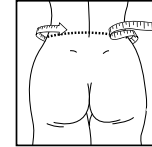



Support for Better Life!

CAMP[®]
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no